



## VariFit™ – NIV maske



Yoğun Bakım • Hasta Önyüzleri

## VariFit™ AIR°gel® teknolojisi özellikli

VariFit, tek hasta kullanımlı hastane NIV maskesi, hasta konforunu geliştirmek üzere AIR°gel® teknoloji kullanılmıştır. Renk kodu dirsekler Bilevel/CPAP için klinisyene uygun ve doğru seçenek sunar tek hatlı solunum sistemi, ya da non-invasif ventilasyon kullanımı çift hatlı solunum sistemi ile. Nefes almaya elverişli hızlı kullanım başlığı ile hastada kolay oturma sağlar hasta konforunu geliştirir.

Videoya burdan ulaşabilirsiniz [www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)



**AIR°gel®** Maksimum konfor, minimum ağırlık AIR°gel® basınç noktalarını ve deri iritasyonunu en aza indirir

**Geliştirilmiş Yastık teknolojisi™**

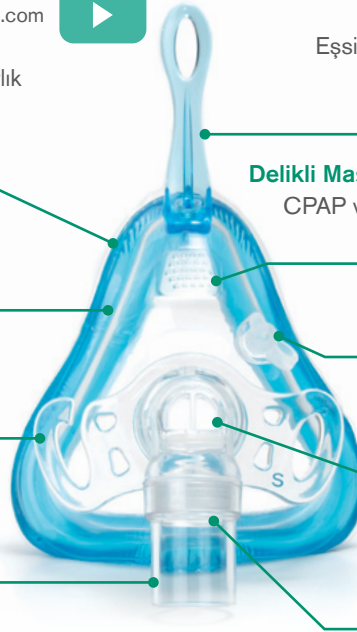
Ergonomik yastık teknolojisi formları rahat bir oturma için etkin yerleştirme

**Aktif başlık konnektörü™**

Güvenilir yerleşim için hastayla birlikte hareket eder.

**360° döner dirsek**

En uygun tüp yerleştirme ve daha kolay hareket imkanı için

**Esnek askı halkası™**

Eşsiz bükülebilir tasarım, üstün stabilite, deriye temas etmeden yerleşme

**Delikli Maske (2260000, 2261000, 2262000 ve 2277000)**

CPAP veya Bilevel ile kullanım için Anti-asfiksasyon valfli delikli maske seçeneği

**Oksijen portu**

Tamamlayıcı oksijenin kolaylıkla verilmesini sağlar

**Anti-asfiksasyon valfi**

Yetersiz solunum durumunda tekrar solumadan korur

**Renk kodlu dirsek**

Klinisyene doğru seçenek seçiminde yardımcı olur

Kod	Tanım	Renk kodu dirsek	Kutu adedi
<b>Tek hatlı solunum sistemleri ile kullanım için CO2 portsuz</b>			
2260000	VariFit NIV asfiksasyon valfsiz delikli, küçük yetişkin	○	8
2261000	VariFit NIV asfiksasyon valfsiz delikli, orta yetişkin	○	8
2262000	VariFit NIV asfiksasyon valfsiz delikli, büyük yetişkin	○	8
2277000	VariFit NIV asfiksasyon valfsiz delikli, ekstra büyük yetişkin	○	8
<b>Tek hatlı solunum sistemleri ile kullanım için CO2 portlu</b>			
2263000	VariFit NIV deliksiz maske anti-asfiksasyon valfli, küçük yetişkin	◐	8
2264000	VariFit NIV deliksiz maske anti-asfiksasyon valfli, orta yetişkin	◐	8
2269000	VariFit NIV deliksiz maske anti-asfiksasyon valfli, büyük yetişkin	◐	8
2278000	VariFit NIV deliksiz maske anti-asfiksasyon valfli, ekstra büyük yetişkin	◐	8
<b>Çift hatlı solunum sistemleri için</b>			
2265000	VariFit NIV deliksiz maske, küçük yetişkin	●	8
2266000	VariFit NIV deliksiz maske, orta yetişkin	●	8
2267000	VariFit NIV deliksiz maske, büyük yetişkin	●	8
2279000	VariFit NIV deliksiz maske, ekstra büyük yetişkin	●	8

**Bilgi edin**

AIR°gel® is a registered trademark of Sleepnet Corporation. Flexible Spacebar, Advanced Cushion Technology and Active Headgear Connector are trademarks of Sleepnet Corporation. VariFit NIV masks are designed and manufactured by Sleepnet Corporation, Hampton, NH, 03842 USA and distributed by Intersurgical Ltd



Intersurgical Medikal Ürünler LTD ŞTİ NidaKule Göztepe Bora Sok no:1  
Merdivenköy/Kadıköy İstanbul



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2004

**Please think before you print**  
Save energy and paper.  
If you must print this information sheet please print it double sided.

IS1.41 • Issue 4 10.17